


回転式小型蒸留装置

(※特許申請中)

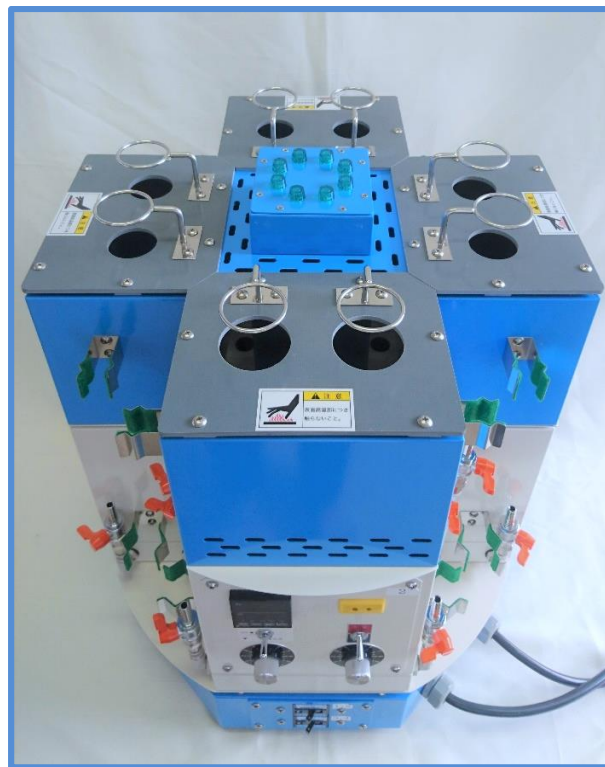

品番	寸法	電源
SGN-2400	W440×W440×H530(mm)	100V/24A

Point1：ドラフト内に設置可能

ガラス器具をセットした状態でドラフト内に設置することが可能です。

Point2：操作しやすい回転式

操作部・ヒーター部が270°回転します。各ヒーターの設定、ガラス器具の取り外しを正面から行うことができます。

運転時には架台上部のパイロットランプが点灯し、各ヒーターの使用状況が一目でわかります。

Point3：ヒーター毎に出力を制御

ヒーター各々で出力を設定することができる為、複数の項目(シアン/ふっ素/アンモニア/フェノール)を同時に蒸留することができます。

単蒸留は8検体、水蒸気蒸留は4検体、同時に蒸留を行えます。ふっ素の場合、蒸留温度145℃に自動で温度を調節します。